



VELTEK ASSOCIATES, INC.

# TECHNICAL DATA FILES



## **STER-AHOL<sup>®</sup> WFI Formula and STER-AHOL Aerosol WFI Formula** 70% USP Denatured Ethanol formulated with 30% USP Water for Injection

*Claims, product registrations, and regulatory requirements may vary based on local, regional, and/or national laws and regulations. Please contact your local sales representative for information specific to your region.*

23JAN2024

Copyright © 2024 Veltek Associates, Inc.

All Rights Reserved. Confidential and Proprietary Property of Veltek Associates, Inc. No part of this document may be reproduced or disclosed, in whole or in part, without the specific written permission of Veltek Associates, Inc

## **TABLE OF CONTENTS**

PRODUCT OVERVIEW .....	3
Quality and Manufacturing.....	3
Features and Benefits.....	4
Product Uses .....	4
ABCD Cleanroom Introduction System® .....	5
DEC-50 AEROSOL DISPENSER .....	5
ORDERING INFORMATION .....	5
CHEMICAL SPECIFICATIONS .....	6
LABELING.....	7
VAI's Product Label Colors .....	7
Product Labeling.....	8
TESTING SUMMARY .....	15
ADDITIONAL DOCUMENTATION.....	18



*VAI®'s STER-AHOL Product Family*

## **PRODUCT OVERVIEW**

**STER-AHOL® WFI Formula** is an EPA registered, 70% Denatured Ethanol with 30% Water for Injection, disinfectant and sanitizer that is made for use in pharmaceutical, biotechnology, medical device, healthcare, and diagnostic manufacturing facilities. **STER-AHOL WFI Formula** has been developed for cleaning rotation cycles where hard surface disinfectants are essential to maintaining a clean environment. In both aseptic and non-aseptic environments, **STER-AHOL WFI Formula**, can be used for the disinfection and decontamination of cleanrooms, controlled areas, hard non-porous environmental surfaces, and many other applications that require the use of a sterile alcohol solution.

### Sanitizer – Disinfectant

**STER-AHOL WFI Formula** is formulated with Ethanol denatured with a small percentage of methyl alcohol and USP Water for Injection then filled in in an ISO 7 cleanroom (Grade B), filtered at 0.2 microns, and subsequently terminally sterilized to  $10^{-6}$  sterility assurance level. Each lot of **STER-AHOL WFI Formula** is sterility tested according to current USP Compendium, is completely traceable, and has been completely validated for sterility and shelf life. **STER-AHOL WFI Formula** is delivered with lot specific analytical, irradiation, and sterility data, tested to current USP compendium.

**STER-AHOL WFI Formula** is available in multiple container sizes including an 11 oz aerosol, a 16 oz trigger spray, a 1 gallon container, and a 5 gallon container. The innovative 11 oz container size is a high quality, nitrogen propelled, aerosol spray can that precipitates in a broad spray/mist without aspiration of the room's air during use. Non-aspiration ensures that the master reservoir of **STER-AHOL Aerosol WFI Formula** remains sterile from the first drop to the last drop. 5 gallon drums are delivered with an attachable faucet that allows users to easily control pouring and prevent overuse. Each sterile container is double bagged and packaged quadruple bagged using the ABCD Cleanroom Introduction System®. **STER-AHOL WFI Formula** is packaged to comply with the requirements for transportation into a classified area.

## **Quality and Manufacturing**

- Filled in in an ISO 7 cleanroom (Grade B)
- Formulated with USP Water for Injection
- Components are air washed with 0.2 micron filtered air before assembly
- Filtered at 0.2 microns
- Gamma irradiated to a sterility assurance level of  $10^{-6}$
- Sterility tested according to Current USP compendium
- Completely traceable from start to finish
- Completely validated for sterility and shelf life

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234  
Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)  
23JAN2024

## Features and Benefits

- EPA registered disinfectant and sanitizer; EPA Registration Number: 68959-1
- EPA registered aerosol disinfectant and sanitizer; EPA Registration Number: 68959-3
- Each sterile container is double bagged packaged in easy tear bags
- Quadruple bagged in the ABCD Cleanroom Introduction System®
- Individually labeled with lot number and expiration
- Delivered with lot specific analytical, irradiation, and sterility data, tested to current USP compendium
- For use on a multitude of surfaces
- Ready-to-use
- Multiple convenient sterile container sizes including an 11 oz aerosol
- 16 oz bottle comes packaged with an attached trigger spray that has the option of spray or stream
- 5 gallon container delivered with an optional unattached faucet for pour control
- Available in an individually packaged saturated wipe: see **STER-AHOL® Wipe\***

\*STER-AHOL Wipe is not EPA Registered

## Product Uses

- On non-food contact, hard non-porous, inanimate surfaces
- Aseptic filling and gowning rooms
- Manufacturing areas and laboratories
- Machinery, tools, tables, counters, laminar-flow benches, floors, walls, carts, shelves
- Glass, plastic, vinyl, chrome, stainless steel

**Veltek Associates, Inc.**


15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## ABCD Cleanroom Introduction System®

The ABCD Cleanroom Introduction System is a packaging system that allows operators/users to take the package through each level of classified areas by simply removing one bag at a time. Each bag acts as barrier protecting the finished product from becoming a carrier of viable and non-viable contamination. This prevents the need to decontaminate each outer bag prior to entering a cleaner area. In this packaging system, sterilized groups of containers are contained in two outer bags and after each are removed individual containers are each additionally contained in two easy tear bags.

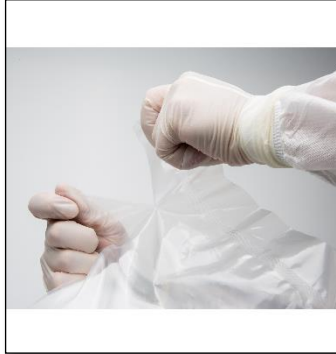

## DEC-50 AEROSOL DISPENSER

The DEC-50 Dispenser is an additional dispensing system for **STER-AHOL® Aerosol WFI Formula** cans. VAI developed the DEC-50 Dispenser to meet the requirements of cGMP cleanroom operations by reducing cross contamination and preventing overuse. The user is able to simply place the back of their gloved hand on the actuation arm to dispense the denatured ethanol rather than handling the aerosol container itself. The DEC-50 can be mounted directly to the wall, is made of 316L stainless steel, and is fully autoclavable. It is excellent for glove disinfection. The compatible part number is DSTER-WFI-SP-70.



## ORDERING INFORMATION

STER-AHOL WFI Formula – 70% Denatured Ethanol with 30% USP Water for Injection		
Part number	Description	Qty/cs
DSTER-WFI-SP-70	STER-AHOL WFI Formula, 11 oz Aerosol Spray/Mist, Sterile	24
DSTER-WFI-TR-04	STER-AHOL WFI Formula, 16 oz Attached Trigger, Sterile	12
DSTER-WFI-B-70	STER-AHOL WFI Formula, 1 Gallon, Sterile	4
DSTER-WFI-70-5G	STER-AHOL WFI Formula, 5 Gallon Drum, Unattached Faucet, Sterile	1
DEC-50	DEC-50 Dispenser, for 11 oz Aerosol Cans, 316L Stainless Steel	1

### Veltek Associates, Inc.

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234  
 Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)  
 23JAN2024

## **CHEMICAL SPECIFICATIONS**

<b>STER-AHOL WFI Formula – 70% Denatured Ethanol with 30% USP Water for Injection</b>	
<b>Certificate of Analysis</b>	<b>Specification</b>
Appearance	Clear colorless
Assay	68.0-72.0%
Non-volatile Residue	<0.5mg
Specific Gravity	0.882-0.892
Expiration Period	3 years



*11 oz Aerosol Mist  
DSTER-WFI-SP-70*



*16 oz Attached Trigger Spray  
DSTER-WFI-TR-04*



*5 Gallon Drum  
DSTER-WFI-70-5G*



## **LABELING**

### **VAI's Product Label Colors**

<b>Product Name</b>	<b>Bottle/Can Color</b>	<b>Label Background Color</b>	<b>Bar &amp; User Info Color</b>	<b>Text Color</b>
DECON-AHOL WFI FORMULA 70% AEROSOL	COOL GREY	PRINTED CAN COOL GREY		
DECON-AHOL WFI FORMULA 70% TRIGGER SPRAY, 1 & 5 GALLON	WHITE	COOL GREY		
DECON-AHOL WFI FORMULA 70% SQUEEZE BOTTLE	WHITE SEMI-TRANSPARENT	COOL GREY		
DECON-AHOL WFI FORMULA 70% ASEPTI-CLEANSE BOTTLE	WHITE SEMI-TRANSPARENT	COOL GREY		
DECON-AHOL WFI FORMULA 60%	WHITE	WHITE		
DECON-AHOL WFI FORMULA 91%	WHITE	WHITE		
DECON-AHOL FORMULA 99%	WHITE	WHITE		
STER-AHOL WFI AEROSOL	WHITE	PRINTED CAN WHITE		
STER-AHOL WFI TRIGGER SPRAY, 1 & 5 GALLON	WHITE	WHITE		
DECON-HAND STERILE	WHITE SEMI-TRANSPARENT	PRINTED BOTTLE		
DECON-HAND NON-STERILE	CLEAR	PRINTED BOTTLE		
DECON-HAND ASEPTI-CLEANSE BOTTLE	WHITE SEMI-TRANSPARENT	WHITE		
STERI-OIL	WHITE	WHITE		
STERI-BUFFER	CLEAR	WHITE		
DECON-PHENE	WHITE	WHITE		
DECON-CYCLE	WHITE	WHITE		
DECON-CLEAN	WHITE	WHITE		
DECON-QUAT 100	WHITE	WHITE		
DECON-QUAT 200C	WHITE	WHITE		
DECON-QUAT 200V	WHITE	WHITE		
HYPO-CHLOR 0.25%	WHITE	WHITE		
HYPO-CHLOR 0.52%	WHITE	WHITE		
HYPO-CHLOR 5.25%	WHITE	WHITE		
STERI-PEROX 3%	WHITE	WHITE		
STERI-PEROX 6%	WHITE	WHITE		
DECON-SPORE 200 PLUS (SPORICIDE)	WHITE SEMI-TRANSPARENT	WHITE		
DECON-SPORE 200 PLUS (DISINFECTANT)	WHITE SEMI-TRANSPARENT	WHITE		
STEEL-BRIGHT	WHITE	WHITE		
STERI-SILICON	WHITE	BLACK		
DECON-GLASS	WHITE	WHITE		
VAI WFI QUALITY WATER	WHITE	WHITE		
STERI-WATER	WHITE	WHITE		

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024



## Product Labeling

# STER-AHOL® WFI Formula

## 70% Denatured Ethanol and 30% USP Water for Injection

### STER-AHOL®

**DISINFECTANT/DESINFECTANTE**  
**\*\*Sterile WFI Formula/Formule Stérile WFI/Formula de Estéril WFI**  
 (Gamma irradiated/irradié au gamma/irradiado con rayos gamma)

For Use in Clean Rooms and Controlled Areas/Pour usage dans les salles blanches et les zones contrôlées Para uso en salas blancas y áreas controladas

**Hard Surface Disinfectant/Desinfectant de superficies duras/Desinfectante para superficies duras**  
**Active Ingredients/Ingédients actifs/Ingredientes activos:**  
 \*Chlorine/Chlorine/Mélange d'hydrogène et de sodium.....70.0%

**Other Ingredients/Autres ingrédients/Outros ingredientes:**  
 \*\*Water/Eau/Agua.....30.0%

**Total:**.....100.00%

\* Ethyl alcohol denatured with methyl alcohol and isopropyl alcohol; contains less than 3.5% methyl alcohol  
 \*Alcool éthylique dénaturé avec du falcisol méthylique et du falcisol isopropylique; contient de falcisol de méthylique inférieur à 3.5%

\*Alcohol etílico denaturado con alcohol metílico y alcohol isopropílico; contiene alcohol metílico a menos del 3.5%  
 \*\*USP Water for Injection/USP Water for Injection/Agua USP para inyección

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS**  
**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**WARNING-FLAMMABLE**  
**AVERTISSEMENT-INFLAMMABLE**  
**ADVERTENCIA-INTENCIONABLE**

Net Contents: ☐ 12 oz (0.354 L) ☐ 4 x 1 Gallon (4 Gallons (15.8 L))

☐ 5 Gallons (18.9 L)

Store at room temperature below 70°F (21°C) / Entreposer à une température ambiante inférieure à 40.0°C (104°F) / Almacenar a una temperatura ambiente menor a 40.0°C (104°F)

See other panel for first aid and additional precautions/Consultez les autres côtés au sujet des premiers soins et des mises en garde supplémentaires/Véase otro panel para obtener información sobre primeros auxilios y otras precauciones. See container for lot number and storage expiration date/ Voir le récipient pour le numéro de lot et la date d'expiration de stockage/ Ver recipiente e número de lote y fecha de vencimiento para almacenamiento.

US EPA Reg. No. 68959-PA-001 EPA Est. No. 68959-PA-001  
 Canadian DIN/DIN Canadian/DIN de Canada: 0235250

Manufactured by Vai par Fabricado por:  
 Vai Associates, Inc. 15 Lee Blvd. Malvern, PA 19355-1234 USA  
 Inquiries/Reservaciones/Informes: 1-888-4-STERILE  
 Patentes/Inventos/Patentes: www.sterile.com/patents

In Canada, distributed by/ Au Canada, distribuido por/ Distribuido en Canadá por:  
 Canada Clean Room, 20 Coppe Rd. Kanata, ON K2M 2S8  
 Inquiries/Reservaciones/Informes: (888) 598-8670 / www.canadacleanroom.com

**IMPORTANT NOTICE:**  
 This product is registered in both the U.S. and Canada. It has BOTH U.S. and Canadian Labeling WHEN USING THIS product in the U.S. Follow the U.S. information, when indicated.  
 WHEN USING THIS product in Canada, follow the Canadian information, when indicated.

**FIRST AID**  
 If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If inhaled: Immediately remove the affected person to fresh air. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If not breathing, call 911 or ambulance, give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth. If breathing is difficult, give oxygen if qualified personnel are available. If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Move person to fresh air. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. Do not give anything to an unconscious person.

**EMERGENCIES AND FIRST RESPONDERS:** For Spill/Spillage/Poison Control Emergency Response Service from the USA and Canada in English, French and Spanish (and 23 other languages) call CARECHEM24 toll free at 866-928-0789 or Canada toll free 1-800-579-7421.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS**  
**HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**  
**WARNING:** Causes substantial but temporary eye injury. Harmful if absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Avoid breathing spray mist. Wear protective eyewear. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

**PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS:** Flammable liquid and vapor. Vapor may cause flash fire. Keep away from heat, sparks, direct sunlight, and open flame. Do not mix this product with other chemicals including acids, oxidizing materials, combustible materials, halogens, peroxides, bases and metal salts.

**DIRECTIONS FOR USE**  
 Read the label before using.  
 In the United States: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.  
 In Canada: This product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

**USG:** Disinfects and sanitizes cleanrooms and controlled areas such as those in health care institutions, biopharmaceutical, pharmaceutical, medical device and diagnostic manufacturing facilities. Use on non-food contact, hard non-porous, inanimate surfaces in areas such as: aseptic filling and gowning rooms, general manufacturing areas and laboratories, or on machinery, tools, tables, counters, laminar-flow benches, floors, walls, carts, shelves made of hard non-porous materials such as glass, plastic, vinyl, chrome, and stainless steel. It is compatible with most hard surface materials.

Label #/Étiquette #/Etiquetas: D-STER-00 Sterile - F-16 - Rev 08/20  
 USPA: VET-109A-VEL-109A-CPR-VEL-109A-ASP

**AVIS IMPORTANT:**  
 Ce produit est enregistré aux États-Unis et au Canada. Il porte des étiquettes américaines ET canadiennes. SI VOUS UTILISEZ CE produit aux États-Unis, suivez l'UNIQUEMENT l'étiquette américaine.  
 SI VOUS UTILISEZ CE produit au Canada, suivez l'UNIQUEMENT l'étiquette canadienne.

**PREMIERS SOINS**  
 En cas de contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, gardez l'œil ouvert et rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Après les cinq premières minutes, retirez la lentille, continuez, et si y a lieu, puis continuez à rincer l'œil. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Retirez les vêtements contaminés. Rincez la peau immédiatement à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. En cas d'inhalation: Retirez immédiatement la personne affectée à l'air frais. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène si personnel qualifié sont disponibles. En cas d'ingestion: Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Déplacer la personne vers une source d'air frais. Ne pas faire vomir à moins d'être requis le conseil de prodigier ainsi par le centre antipoison ou la médecine. Ne pas administrer à une personne inconsciente. Ne rien lui faire avaler avant d'appeler du produit ou du produit d'un centre antipoison ou d'un médecin ou pour recevoir un traitement.

**URGENCES ET PREMIERS INTERVENANTS:** Pour en cas de déversement / Exposition / Poison Service d'intervention d'urgence des États-Unis et du Canada en anglais, français et espagnol (et en 23 autres langues), appelez sans frais au Carechem24 866-928-0789 ou Canada sans frais 1-800-579-7421.

**MISES EN GARDE**  
**DANGER POUR L'HOMME ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES**  
**AVERTISSEMENT:** Provoque des lésions importantes mais temporaires aux yeux. Nocif si absorbé par la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Éviter d'empêcher le bruyant de pulvérisation. Porter des lunettes de protection. Laver en profondeur avec du savon et de l'eau après la manipulation et avant de manger, de boire, de fumer, de consommer du tabac ou d'utiliser la toilette.

**RISQUES D'ORIGINE PHYSIQUE ET CHIMIQUE:** Liquide et vapeurs inflammables. Les vapeurs peuvent causer un incendie instantané. Retirer à l'écart de la chaleur, des étincelles, des rayons directs du soleil, et des flammes. Ne pas mélanger ce produit à tout autre produit chimique (acides, matières oxydantes, matières combustibles, halogènes, peroxydes, bases et sels métalliques).

**DIRECTIONS D'UTILISATION**  
 Lire l'étiquette avant utilisation.  
 Aux États-Unis: L'utilisation de ce produit sans se conformer aux directives inscrites sur l'étiquette représente une infraction à la loi fédérale.  
 Au Canada: Ce produit est à utiliser uniquement selon les directives inscrites sur l'étiquette. L'utilisation de ce produit sans se conformer aux directives inscrites sur l'étiquette représente une infraction à la loi fédérale.

**USAGES:** Ce produit sert à la désinfection et à la stérilisation des salles blanches et des zones contrôlées comme celles qui se trouvent dans les établissements de soins de santé ainsi que les installations biopharmaceutiques et des unités de production de matériel médical et de diagnostic. L'utilisation sur des surfaces inertes en contact avec les aliments inscrites non poreuses de conditionnement aseptique et d'habillage, des zones de fabrication générale et de laboratoires ou sur la machine, des salles de tables, des comptoirs, des bancs à flux laminaire, des planchers, des murs, des charnières, des étagères faites de matériaux durs non poreux tels que le verre, le plastique, le vinyle, le chrome et l'acier inoxydable. Il est compatible avec la plupart des matériaux de surfaces dures.

Read the label for Spanish and additional information  
 Déroulez ici pour l'étiquette espagnole des informations supplémentaires  
 Despliega aquí para obtener la versión en español de la información adicional

Case Label DSTER-00 Rev 08/20

### STER-AHOL® AEROSOL

**\*\*Sterile WFI Formula/Formule Stérile WFI/Formula de Estéril WFI**  
 (Gamma irradiated/irradié au gamma/irradiado con rayos gamma)

For Use in Clean Rooms and Controlled Areas/Pour usage dans les salles blanches et les zones contrôlées Para uso en salas blancas y áreas controladas

**Hard Surface Disinfectant/Desinfectant de superficies duras/Desinfectante para superficies duras**  
**Active Ingredients/Ingédients actifs/Ingredientes activos:**  
 \*Chlorine/Chlorine/Mélange d'hydrogène et de sodium.....70.0%

**Other Ingredients/Autres ingrédients/Outros ingredientes:**  
 \*\*Water/Eau/Agua.....30.0%

**Total:**.....100.00%

\* Ethyl alcohol denatured with methyl alcohol and isopropyl alcohol; contains less than 3.5% methyl alcohol  
 \*Alcool éthylique dénaturé avec du falcisol méthylique et du falcisol isopropylique; contient de falcisol de méthylique inférieur à 3.5%

\*Alcohol etílico denaturado con alcohol metílico y alcohol isopropílico; contiene alcohol metílico a menos del 3.5%  
 \*\*USP Water for Injection/USP Water for Injection/Agua USP para inyección

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS**  
**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA**  
**FLAMMABLE/INTENCIONABLE/INTENCIONABLE**

Keep away from heat or open flame/Garder ce produit loin de la chaleur ou des flammes sans/Manténgase alejado del calor o una llama encendida. Contents under pressure/Contenu sous pression/Contenido bajo presión. Store at room temperature below 40.0°C (104°F) / Entreposer à une température ambiante inférieure à 40.0°C (104°F) / Almacenar a una temperatura ambiente menor a 40.0°C (104°F)

See other panel for first aid and additional precautions/Consultez les autres côtés au sujet des premiers soins et des mises en garde supplémentaires/Véase otro panel para obtener información sobre primeros auxilios y otras precauciones. See container for lot number and storage expiration date/ Voir le récipient pour le numéro de lot et la date d'expiration de stockage/ Ver recipiente e número de lote y fecha de vencimiento para almacenamiento.

US EPA Reg. No. 68959-PA-001 EPA Est. No. 68959-PA-001  
 Canadian DIN/DIN Canadian/DIN de Canada: 0235250

Manufactured by Vai par Fabricado por:  
 Vai Associates, Inc. 15 Lee Blvd. Malvern, PA 19355-1234 USA  
 Inquiries/Reservaciones/Informes: 1-888-4-STERILE  
 Patentes/Inventos/Patentes: www.sterile.com/patents

In Canada, distributed by/ Au Canada, distribuido por/ Distribuido en Canadá por:  
 Canada Clean Room, 20 Coppe Rd. Kanata, ON K2M 2S8  
 Inquiries/Reservaciones/Informes: (888) 598-8670 / www.canadacleanroom.com

**IMPORTANT NOTICE:**  
 This product is registered in both the U.S. and Canada. It has BOTH U.S. and Canadian Labeling WHEN USING THIS product in the U.S. Follow the U.S. information, when indicated.  
 WHEN USING THIS product in Canada, follow the Canadian information, when indicated.

**FIRST AID**  
 If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If inhaled: Immediately remove the affected person to fresh air. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If not breathing, call 911 or ambulance, give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth. If breathing is difficult, give oxygen if qualified personnel are available. If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Move person to fresh air. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. Do not give anything to an unconscious person.

**EMERGENCIES AND FIRST RESPONDERS:** For Spill/Spillage/Poison Control Emergency Response Service from the USA and Canada in English, French and Spanish (and 23 other languages) call CARECHEM24 toll free at 866-928-0789 or Canada toll free 1-800-579-7421.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS**  
**HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**  
**WARNING:** Causes substantial but temporary eye injury. Harmful if absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Avoid breathing spray mist. Wear protective eyewear. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

**PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS:** Flammable liquid and vapor. Vapor may cause flash fire. Keep away from heat, sparks, direct sunlight, and open flame. Do not mix this product with other chemicals including acids, oxidizing materials, combustible materials, halogens, peroxides, bases and metal salts.

**DIRECTIONS FOR USE**  
 Read the label before using.  
 In the United States: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.  
 In Canada: This product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

**USG:** Disinfects and sanitizes cleanrooms and controlled areas such as those in health care institutions, biopharmaceutical, pharmaceutical, medical device and diagnostic manufacturing facilities. Use on non-food contact, hard non-porous, inanimate surfaces in areas such as: aseptic filling and gowning rooms, general manufacturing areas and laboratories, or on machinery, tools, tables, counters, laminar-flow benches, floors, walls, carts, shelves made of hard non-porous materials such as glass, plastic, vinyl, chrome, and stainless steel. It is compatible with most hard surface materials.

Label #/Étiquette #/Etiquetas: D-STER-AERO-00 Sterile - F-16 - Rev 08/20  
 USPA: VET-109A-VEL-109A-CPR-VEL-109A-ASP

**AVIS IMPORTANT:**  
 Ce produit est enregistré aux États-Unis et au Canada. Il porte des étiquettes américaines ET canadiennes. SI VOUS UTILISEZ CE produit aux États-Unis, suivez l'UNIQUEMENT l'étiquette américaine.  
 SI VOUS UTILISEZ CE produit au Canada, suivez l'UNIQUEMENT l'étiquette canadienne.

**PREMIERS SOINS**  
 En cas de contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, gardez l'œil ouvert et rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Après les cinq premières minutes, retirez la lentille, continuez, et si y a lieu, puis continuez à rincer l'œil. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Retirez les vêtements contaminés. Rincez la peau immédiatement à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. En cas d'inhalation: Retirez immédiatement la personne affectée à l'air frais. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène si personnel qualifié sont disponibles. En cas d'ingestion: Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour connaître le traitement recommandé. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Déplacer la personne vers une source d'air frais. Ne pas faire vomir à moins d'être requis le conseil de prodigier ainsi par le centre antipoison ou la médecine. Ne pas administrer à une personne inconsciente. Ne rien lui faire avaler avant d'appeler du produit ou du produit d'un centre antipoison ou d'un médecin ou pour recevoir un traitement.

**URGENCES ET PREMIERS INTERVENANTS:** Pour en cas de déversement / Exposition / Poison Service d'intervention d'urgence des États-Unis et du Canada en anglais, français et espagnol (et en 23 autres langues), appelez sans frais au Carechem24 866-928-0789 ou Canada sans frais 1-800-579-7421.

**MISES EN GARDE**  
**DANGER POUR L'HOMME ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES**  
**AVERTISSEMENT:** Provoque des lésions importantes mais temporaires aux yeux. Nocif si absorbé par la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Éviter d'empêcher le bruyant de pulvérisation. Porter des lunettes de protection. Laver soigneusement avec du savon et de l'eau après la manipulation et avant de manger, de boire, de fumer, de consommer du tabac ou d'utiliser la toilette.

**RISQUES D'ORIGINE PHYSIQUE ET CHIMIQUE:** Liquide et vapeurs inflammables. Les vapeurs peuvent causer un feu à l'inflammation instantanée. Contenus sous pression. Garder le produit à l'écart des sources de chaleur, des étincelles, de la lumière directe du soleil et des flammes nues. Ne pas perforez ou inciser le contenant. Exposition à des températures supérieures à 40.0°C (104°F) peut faire éclater le contenant.

**DIRECTIONS D'UTILISATION**  
 Lire l'étiquette avant utilisation.  
 Aux États-Unis: L'utilisation de ce produit sans se conformer aux directives inscrites sur l'étiquette représente une infraction à la loi fédérale.  
 Au Canada: Ce produit est à utiliser uniquement selon les directives inscrites sur l'étiquette. L'utilisation de ce produit sans se conformer aux directives inscrites sur l'étiquette représente une infraction à la loi fédérale.

**USAGES:** Ce produit sert à la désinfection et à la stérilisation des salles blanches et des zones contrôlées comme celles qui se trouvent dans les établissements de soins de santé ainsi que les installations biopharmaceutiques et des unités de production de matériel médical et de diagnostic. L'utilisation sur des surfaces inertes en contact avec les aliments inscrites non poreuses de conditionnement aseptique et d'habillage, des zones de fabrication générale et de laboratoires ou sur la machine, des salles de tables, des comptoirs, des bancs à flux laminaire, des planchers, des murs, des charnières, des étagères faites de matériaux durs non poreux tels que le verre, le plastique, le vinyle, le chrome et l'acier inoxydable. Il est compatible avec la plupart des matériaux de surfaces dures.

Read the label for Spanish and additional information  
 Déroulez ici pour l'étiquette espagnole des informations supplémentaires  
 Despliega aquí para la versión en español de la información adicional

Case Label DSTER-AERO-00 Rev 08/20

Any specific product label is available upon request.

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 www.sterile.com

23JAN2024



**Product Labeling (Continued)****Aerosol Can****IMPORTANT NOTICE**

This product is registered in both the U.S. and Canada

It has BOTH U.S. and Canadian Labeling

WHEN USING THIS product in the U.S. follow the U.S. information, where indicated

WHEN USING THIS product in Canada, follow the Canadian information, where indicated

**STER-AHOL® Aerosol****WFI Formula****•Mist**

*Gamma Irradiated • Sterile*

*For Use in Clean Rooms and Controlled Areas*

*Hard Surface Disinfectant*

**Active Ingredients:**

\*Ethanol Mixture ..... 70.0%

**Other Ingredients:**

\*\*Water ..... 30.0%

**Total ..... 100.0%**

\*Ethyl alcohol denatured with methyl alcohol and isopropyl alcohol; contains less than 3.5% methyl alcohol

\*\*USP Water for Injection



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**WARNING – FLAMMABLE**

**Keep away from heat or open flame**

**Contents under pressure**

**Store at room temperature below 48.8°C (120°F)**

See panel for first aid, additional precautions, and directions for use.

Peel back for Spanish and additional information.

See container for lot number and storage expiration date.

**For Spill/Exposure/Poison Control Emergency Response Service from the USA and Canada in English, French, and Spanish (and 23 other languages) call CARECHEM24 866-928-0789.**

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## Product Labeling (Continued)

**US EPA Reg. No.:** 68959-3

**US EPA Est. No.:** 68959-PA-001

**Canadian DIN:** 02351226

### STER-AHOL Aerosol WFI Formula

**STER-AHOL Aerosol WFI Formula** is sterilized via gamma irradiation to  $10^{-6}$  SAL and is for use in controlled, aseptic, or sterile areas. **STER-AHOL Aerosol WFI Formula** is bactericidal per the results of AOAC Efficacy Tests showing that **STER-AHOL Aerosol WFI Formula** is an effective hard surface disinfectant against *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC# 15442), *Staphylococcus aureus* (ATCC# 6538), *Salmonella enterica* (ATCC# 10708) in 10 minutes. **STER-AHOL Aerosol WFI Formula** is an effective sanitizer on inanimate, non-food contact surfaces against *Staphylococcus aureus* (ATCC# 6538) and *Klebsiella pneumonia* (ATCC# 4352) in 5 minutes.

### FIRST AID

**If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

**If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

**If inhaled:** Immediately remove the affected person to fresh air. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If not breathing, call 911 or an ambulance, give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth. If breathing is difficult, give oxygen if qualified personnel are available.

**EMERGENCIES and FIRST RESPONDERS:** For Spill/Exposure/Poison Control Emergency Response Service from the USA and Canada in English, French and Spanish (and 23 other languages) call CARECHEM24 toll free at 866-928-0789.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

**WARNING:** Causes substantial but temporary eye injury. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing spray mist. Wear protective eyewear. Wash thoroughly with soap and water after handling and before, eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

**PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS:** Flammable liquid and vapor. Vapor may cause flash fire. Contents under pressure. Keep away from heat, sparks, direct sunlight, and open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 48.8°C (120°F) may cause bursting.

**STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

**Storage:** Store in the original container in a dry cool place below 48.8°C (120°F).

**Disposal:** Wastes resulting from the use of this product must be disposed of on site or at an approved waste disposal facility. If wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your Federal/Provincial/State or Local/Municipal environmental control agency for guidance.

**Container Handling:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Do not puncture or incinerate. Offer for recycling, or dispose of in a sanitary landfill.

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## Product Labeling (Continued)

### DIRECTIONS FOR USE

**Read the label before using**

In the United States: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

In Canada: This product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

**USE:** Disinfects and sanitizes cleanrooms and controlled areas such as those in health care institutions, biopharmaceutical, pharmaceutical, medical device and diagnostic manufacturing facilities. Use on non-food contact, hard non-porous, inanimate surfaces in aseptic filling and gowning rooms, general manufacturing areas and laboratories, or on machinery, tools, tables, counters, laminar flow benches, floors, walls, carts, shelves made of hard non-porous material such as glass, plastic, vinyl, chrome, and stainless steel. It is compatible with most hard surface materials.

**DISINFECTION:** Use this product while wearing personal protection such as eye protection and gloves. Use with adequate ventilation and spray away from eyes and face. **STER-AHOL Aerosol WFI Formula** is ready to use. Pre-clean all surfaces prior to disinfecting. Hold can upright 6-8 inches (15-20 cm) from surface. Thoroughly wet surface with **STER-AHOL Aerosol WFI Formula** and allow to remain wet for a minimum of 10 minutes. Allow surface to air dry, or after 10 minutes wipe dry with sterilized cloth, wiper, if needed.

*This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normal sterile areas of the body. This product may be used to pre-clean or decontaminate critical or semi-critical devices prior to sterilization or high level disinfection.*

**SANITIZATION:** Follow all disinfection directions and allow to remain wet for a minimum of 5 minutes.



*11 oz Aerosol Inverta Spray/Mist  
DSTER-WFI-SP-70-B*

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234  
Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)  
23JAN2024

**Product Labeling (Continued)****Disinfectant****IMPORTANT NOTICE**

This product is registered in both the U.S. and Canada

It has BOTH U.S. and Canadian Labeling

WHEN USING THIS product in the U.S. follow the U.S. information, where indicated

WHEN USING THIS product in Canada, follow the Canadian information, where indicated

**STER-AHOL® Disinfectant**

*{Alternate Brand Name: STER-AHOL®}*

**WFI Formula**

*Gamma Irradiated • Sterile*

*For Use in Clean Rooms and Controlled Areas*

*Hard Surface Disinfectant*

**Active Ingredients:**

\*Ethanol Mixture .....70.0%

**Other Ingredients:**

\*\*Water .....30.0%

**Total .....100.0%**

\*Ethyl alcohol denatured with methyl alcohol and isopropyl alcohol; contains less than 3.5% methyl alcohol

\*\*USP Water for Injection



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**WARNING – FLAMMABLE**

**Store at room temperature below 48.8°C (120°F)**

See panel for first aid, additional precautions, and directions for use.

Peel back for Spanish and additional information.

See container for lot number and storage expiration date.

**For Spill/Exposure/Poison Control Emergency Response Service from the USA and Canada in English, French, and Spanish (and 23 other languages) call CARECHEM24 866-928-0789.**

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## Product Labeling (Continued)

**US EPA Reg. No.:** 68959-1

**US EPA Est. No.:** 68959-PA-001

**Canadian DIN:** 02351250

### STER-AHOL WFI Formula

**STER-AHOL WFI Formula** is sterilized via gamma irradiation to  $10^{-6}$  SAL and is for use in controlled, aseptic, or sterile areas. **STER-AHOL WFI Formula** is bactericidal per the results of AOAC Efficacy Tests showing that **STER-AHOL WFI Formula** is an effective hard surface disinfectant against *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC# 15442), *Staphylococcus aureus* (ATCC# 6538), *Salmonella enterica* (ATCC# 10708) in 10 minutes. **STER-AHOL WFI Formula** is an effective sanitizer on inanimate, non-food contact surfaces against *Staphylococcus aureus* (ATCC# 6538) and *Klebsiella pneumonia* (ATCC# 4352) in 5 minutes.

### FIRST AID

**If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

**If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

**If inhaled:** Immediately remove the affected person to fresh air. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If not breathing, call 911 or an ambulance, give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth. If breathing is difficult, give oxygen if qualified personnel are available.

**If swallowed:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have a person sip a glass of water if able to swallow. Move person to fresh air. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. Do not give anything to an unconscious person.

**EMERGENCIES and FIRST RESPONDERS:** For Spill/Exposure/Poison Control Emergency Response Service from the USA and Canada in English, French and Spanish (and 23 other languages) call CARECHEM24 toll free at 866-928-0789.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

**WARNING:** Causes substantial but temporary eye injury. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing spray mist. Wear protective eyewear. Wash thoroughly with soap and water after handling and before, eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

**PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS:** Flammable liquid and vapor. Vapor may cause flash fire. Contents under pressure. Keep away from heat, sparks, direct sunlight, and open flame. Do not mix this product with other chemicals including: acids, oxidizing materials, combustible materials, halogens, peroxides, bases and metal salts.

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024



## Product Labeling (Continued)

**STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

**Storage:** Store in the original container in a dry cool place below 48.8°C (120°F).

**Disposal:** Wastes resulting from the use of this product must be disposed of on site or at an approved waste disposal facility. If wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your Federal/Provincial/State or Local/Municipal environmental control agency for guidance.

**Container Handling:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Do not puncture container and do not incinerate container. Offer for recycling, or dispose of in a sanitary landfill.

## DIRECTIONS FOR USE

### Read the label before using

In the United States: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

In Canada: This product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

**USE:** Disinfects and sanitizes cleanrooms and controlled areas such as those in health care institutions, biopharmaceutical, pharmaceutical, medical device and diagnostic manufacturing facilities. Use on non-food contact, hard non-porous, inanimate surfaces in areas such as: aseptic filling and gowning rooms, general manufacturing areas and laboratories, or on machinery, tools, tables, counters, laminar flow benches, floors, walls, carts, shelves made of hard non-porous material such as glass, plastic, vinyl, chrome, and stainless steel. It is compatible with most hard surface materials.

**DISINFECTION:** Use this product while wearing personal protection such as eye protection and gloves. Use with adequate ventilation and spray away from eyes and face. **STER-AHOL WFI Formula** is ready to use. Do not dilute. Pre-clean all surfaces prior to disinfecting. Hold container upright 6-8 inches (15-20 cm) from surface or apply with saturated cloth or immerse item in a basin. Thoroughly wet surface with **STER-AHOL WFI Formula** and allow to remain wet for a minimum of 10 minutes. Allow surface to air dry, or after 10 minutes wipe dry with sterilized cloth wiper, if needed. Do not replace excess product into original container after use or after removal from original container, even if it was not used.

*This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that is (1) introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contact intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normal sterile areas of the body. This product may be used to pre-clean or decontaminate critical or semi-critical devices prior to sterilization or high level disinfection.*

**SANITIZATION:** Follow all disinfection directions and allow to remain wet for a minimum of 5 minutes.

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## **TESTING SUMMARY**

### **EFFICACY TEST SUMMARY**

#### **STER-AHOL® WFI FORMULA – 70% Denatured Ethanol and 30% USP Water for Injection**

##### **Bactericidal**

This product is bactericidal according to the AOAC Use Dilution Test Germicidal Spray Method in the presence of 5% fetal bovine serum organic soil load on hard inanimate surfaces in EPA OPP Method “Disinfectants for Use on Hard surfaces, DIS/TSS-1” and “Supplemental Recommendations DIS/TSS-2, Germicidal Spray Products as Disinfectants”, 961.02 in Official Methods of analysis of the AOAC Ch. 6, when not more than 1 out of 60 carriers per Lot per organism are positive for growth in 10 minutes. For Canada; Assessment of Efficacy of Antimicrobial Agents for Use on Environmental Surfaces and Medical Devices CAN/CGSB-2, 161-97 when not more than 2 out of 60 carriers are positive for growth in 10 minutes. (Total carriers = 540).

<b>AOAC Use Dilution Test Germicidal Spray Method</b>				
<b>Organism</b>	<b>Carrier Population</b>	<b>Sample Lot (All &gt;60 days old)</b>	<b># Carriers</b>	<b># Positive</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC #15442	$1.40 \times 10^7$ CFU/Carrier	A, B, and C	60	0/60
<i>Salmonella enterica</i> ATCC #10708	$2.16 \times 10^5$ CFU/Carrier	A, B, and C	60	0/60
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC #6538	$2.03 \times 10^6$ CFU/Carrier	A, B, and C	60	0/60

##### **Sanitizer**

Testing per ASTM Standard Test Method for Efficacy of Sanitizers Recommended for Inanimate Non-Food Contact Surfaces, Germicidal Spray Method in the presence of 5% organic soil and for Canada Assessment of Efficacy of Antimicrobial Agents for Use on Environmental Surfaces and Medical Devices CAN/CGSB-2 161-97 showed sanitization was effective. Five carriers were used per 3 separate lots, all of which were >60 days old. This product is considered a sanitizer in this test when test results show a reduction of at least 99.9% (3 Log10) in the average numbers of each test microorganism on each carrier count within 5 minutes.

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## TESTING SUMMARY (Continued)

ASTM Standard Test Method for Efficacy of Sanitizers Recommended for Inanimate Non-Food Contact Surfaces, Germicidal Spray Method				
Organism	Avg Carrier Population	Sample Lot	Avg Survivors/Carrier	Percent Kill
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC #6538	$3.74 \times 10^6$	A, B, and C	$<2 \times 10^1$	>99.9
<i>Klebsiella pneumonia</i> ATCC #4352	$4.02 \times 10^6$	A, B, and C	$<2 \times 10^1$	>99.9

## STER-AHOL® AEROSOL WFI FORMULA – 70% Denatured Ethanol and 30% USP Water for Injection

### Bactericidal

This product is bactericidal according to the AOAC Use Dilution Test Germicidal Spray Method on hard inanimate surfaces in EPA OPP Method “Disinfectants for Use on Hard surfaces, DIS/TSS-1” and “Supplemental Recommendations DIS/TSS-2, Germicidal Spray Products as Disinfectants”, 961.02 in Official Methods of analysis of the AOAC Ch. 6, when not more than 1 out of 60 carriers per Lot per organism are positive for growth in 10 minutes. For Canada; Assessment of Efficacy of Antimicrobial Agents for Use on Environmental Surfaces and Medical Devices CAN/CGSB-2, 161-97 when not more than 2 out of 60 carriers are positive for growth in 10 minutes. (Total carriers = 540).

AOAC Use Dilution Test Germicidal Spray Method				
Organism	Carrier Population	Sample Lot (All >60 days old)	# Carriers	# Positive
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC #15442	$4.4 \times 10^6$ CFU/Carrier	A, B, and C	60	0/60
<i>Salmonella enterica</i> ATCC #10708	$3.4 \times 10^5$ CFU/Carrier	A, B, and C	60	0/60
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC #6538	$4.2 \times 10^6$ CFU/Carrier	A, B, and C	60	0/60

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## TESTING SUMMARY (Continued)

### Sanitizer

Testing per ASTM Standard Test Method for Efficacy of Sanitizers Recommended for Inanimate Non-Food Contact Surfaces, Germicidal Spray Method and for Canada: Assessment of Efficacy of Antimicrobial Agents for Use on Environmental Surfaces and Medical Devices CAN/CGSB-2 161-97 showed sanitization was effective. Five carriers were used per 3 separate lots, all of which were >60 days old. This product is considered a sanitizer in this test when test results show a reduction of at least 99.9% (3 Log10) in the average numbers of each test microorganism on each carrier count within 5 minutes.

ASTM Standard Test Method for Efficacy of Sanitizers Recommended for Inanimate Non-Food Contact Surfaces, Germicidal Spray Method				
Organism	Avg Carrier Population	Sample Lot	Avg Survivors /Carrier	Percent Kill
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC #6538	$1.51 \times 10^6$	A, B, and C	$<2 \times 10^1$	>99.9
<i>Klebsiella pneumonia</i> ATCC #4352	$1.78 \times 10^6$	A, B, and C	$<2 \times 10^1$	>99.9

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234

Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)

23JAN2024

## **ADDITIONAL DOCUMENTATION**

Upon request, the following additional documentation is available:

- Specific Product Testing Reports
- Safety Data Sheet
- Product Validation
- In-use Validation Report
- Sample Lot Specific Documentation – Delivered with lot specific analytical, irradiation, and sterility data, tested to current USP compendium



*VAI®'s SCMD Product Family*

VAI's Sterile Chemical Manufacturing Division (SCMD) manufactures a complete range of cleaning agents and disinfectants that are used daily in cleanroom operations. Overall, VAI's capabilities for manufacturing products include the ability to fill aerosol, bulk, and unit dose packages in ISO 5 or 7 (Grade A/B). Our aseptic filling operations are coupled with the validated and proven ability to irradiate a final product. Assurances are taken in every aspect of SCMD concerning sterility and particulate removal. VAI's operations mirror current GMP's and enforces the adherence to USP specifications. VAI is an EPA and FDA registered facility. For more information call 610-644-8335, email [sales@sterile.com](mailto:sales@sterile.com) or visit our website at [www.sterile.com](http://www.sterile.com). Patents: [www.sterile.com/patents](http://www.sterile.com/patents)

**Veltek Associates, Inc.**

15 Lee Boulevard, Malvern, PA 19355-1234  
Tel: 610-644-8335 Fax: 610-644-8335 [www.sterile.com](http://www.sterile.com)  
23JAN2024